

Aparelho auditivo sem fio binaural

Materiais: Plástico ABS + Silicone

Versão Bluetooth: 5.0

Distância do Bluetooth: 10 metros

Capacidade da bateria do fone de ouvido: 35mA

Capacidade da bateria da caixa de armazenamento: 300mA

Tempo de jogo: 4-5 horas

Caixa de gravador: 1-2 horas

Tempo de espera: 120 horas

Nível NC □ □ 25db


Frequência: 2,4 GHz

Tamanho da caixa: 73*45*25mm



TWS Binaural Wireless Hearing Aid



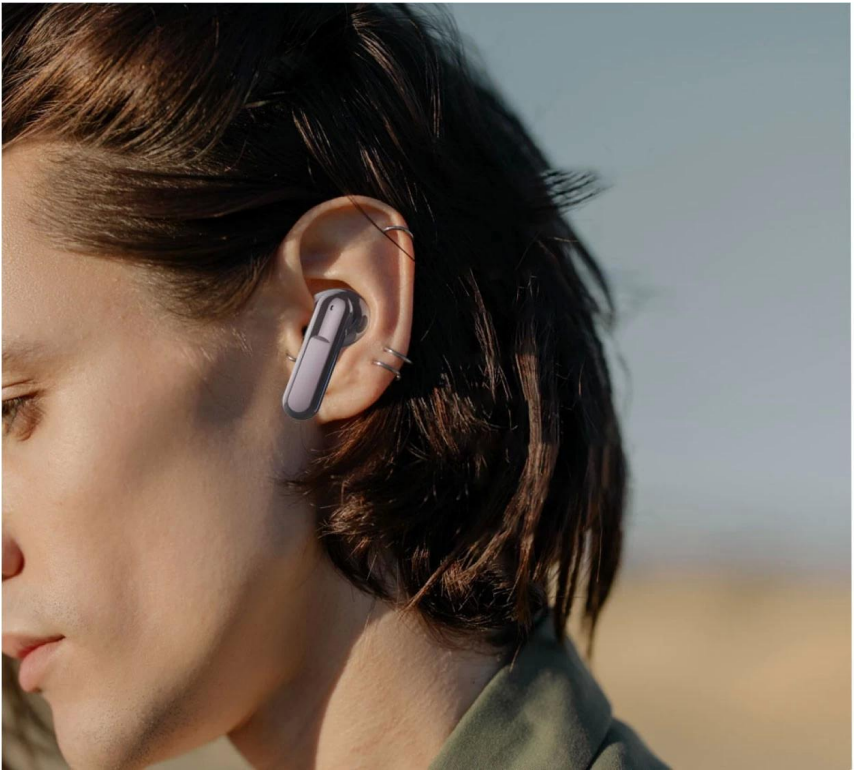

White



Black



Blue




Purple

Wireless Bluetooth transmission

Wireless Bluetooth 5.1, 10 meters distance transmission



Smart noise reduction

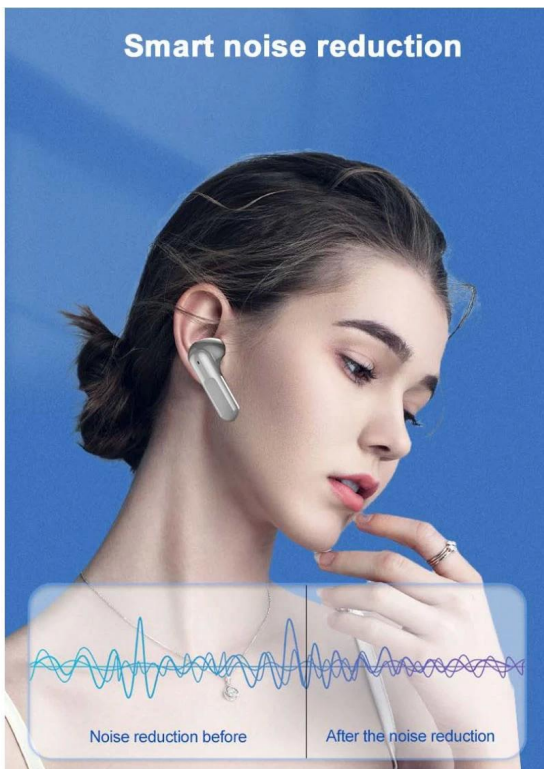

Use in multiple scenarios



One-on-one
communication



Watching TV



Play the music



conversation



From the
conversation



Children
communication



HOW TO USE

Open the charging compartment, wait for the green/orange light to go out, and the headset prompts that the pairing is successful.

Open the charging compartment, wait for the green/orange light to go out, and the headset prompts that the pairing is successful. The earphones can be used individually or in pairs. In the state of playing music, touch the middle of the earphone handle with your hand, and the music sound of the music will change from small to large, and the volume can be controlled in a total of 16 levels

Pinch 1.5S to play music, then pinch 1.5S to pause the music

To answer the incoming call, tap 1S, and tap 1S to turn off the phone.

Hearing aid/assisted hearing mode, the 3S earphone has a prompt volume sound, indicating that the hearing aid auxiliary mode is turned on, and at the same time, the music can be played or paused without affecting the hearing aid function

In the hearing aid mode, the music volume can be adjusted.

You can use APP to pair earphones to adjust the effect of hearing aid magnification and adapt to different groups of people.

TWS Binaural Wireless Hearing Aid




IMPORTANT FUNCTIONS


Wearing this hearing aid can significantly improve hearing

OPERATION INTRODUCTION

CHARGE WAREHOUSE

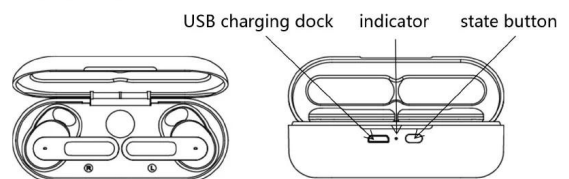

TWS EARPHONE

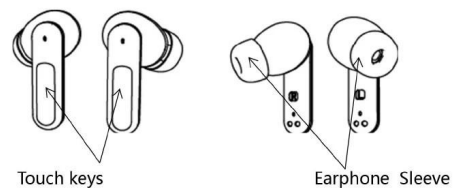

CHARGING COMPARTMENT FUNCTION

NO	Function	operational approach	LED indication
1	Charging the charging compartment	Connect lightning cable	When charging, the orange light flashes for a long time, and the orange light turns to green light for 3s after fully charged; Less than full power: the orange light keeps on for 8s;
2	Stop charging	Press the trigger button to unplug the lightning cable	Green light is on last 3s
3	Earphone in warehouse	Put the earphones in the compartment (after the earphones are in contact with the charging contacts)	Electricity> 10%, green light flash 1 time ; Electricity <=10%, orange light flash 1 time ;
4	Headphone out of warehouse	Headphone release bin (after the headphone leaves the charging contacts)	Electricity> 10%, green lightflash 1 time ; Electricity <=10%, orange light flash 1 time ;
5	low battery	When the power level of the trigger button is 0, remind	Orange light last flash, 3s
6	Charging compartment battery check	Short press button	Electricity> 25%, green light flash 1 time ; Electricity <=25%, orange light flash 1 time,;
7	Uncap	Open the charging compartment cover	Electricity> 10%, the green light turns on for 3 seconds and then goes out; Electricity <=10%, range light Flash 3 times;
8	Close the lid	Close the charging compartment cover	Electricity> 10%, the green light turns on for 3 seconds and then goes out; Electricity <=10%, the orange light turns on for 3s and goes out;
9	In-house matching	Open the cover, the green light/orange light is on and the headset is paired in the compartment	Pairing successfully: the headset will prompt the pairing success message ONE TWO; Pairing failed: no prompt;
10	Full battery prompt	After fully charged	When it reaches full power: the green light is always on; When the lightning line is connected; When the battery is not full, press the button shortly, the orange light flashes for a long time; Fully charged, short press the button, the green light flash 1 time.

PROMPT TONE

Key pattern	Function	functional operation	LED indicate	voice prompt
MFB	Power on	open a position	The green light goes out	POWER ON
	Power off	Warehousing	Green light out	POWER OFF
	Match	Warehouse Entry/Exit	Green light out	ONE TWO
	Hearing Aid Mode	Default	NA	
	Pure Bluetooth mode	Touch & Hold 3s	NA	The beep goes on twice
	Answering calls	Short Press	NA	One beep
	hang up	Long press 1s/ double click	NA	One beep
	Decline calls	Long press 1 NA	NA	One beep
	play music	Long press 1.5s	NA	One beep
	Pause	Long press 1.5s	NA	One beep
V+/V-	volume plus	Double click for 0.5s / hearing aid volume plus one level, a total of 6 levels, the volume is cycled from high to low	NA	Beep. . . .

HEARING AID SPECIFICATIONS

Hearing aid specifications	sensitivity of a pickup	-38dB
	Pickup distance	3-5m
	Pickup noise suppression	-60db
	Howling suppression ratio	-40db
	Pickup gain	-30db
	Pickup frequency	125HZ-10KHZ

BLUETOOTH SPECIFICATIONS

Bluetooth specifications	DSP	QC9864BT
	Bluetooth version	5.1
	Frequency range	2.402GHz-2.480GHz
	transmission distance (unobstructed)	≤15meter
	Track system	Stereo
Output specifications	Speaker Impedance	32Ω/Φ10mm
	Audio Power Output(Max)	135mW
	Headphones Sensitivity	120dB
	Frequency range	20HZ-20KHZ
	distortion factor	<1%
	SNR	≥90dB
	Depth of call noise reduction	adjustable0-30dB

PERGUNTAS FREQUENTES:

Sobre companhia:

- Quanto tempo sua empresa lida com negócios eletrônicos? Você é fabricação?

A Jaskey Limited é uma empresa de design, desenvolvimento, fabrica em mais de 12 anos de experiência e nos especializamos em produtos eletrônicos da moda moderna com valor agregado ao mercado eletrônico de consumo.

- Qual auditoria de fábrica você fez?

Nossa fabricação já fez auditoria de fábrica do Sedex 4p, BSCI, ISO9001 com um sistema de controle de qualidade profissional.

- Qual mercado é o seu principal mercado de negócios?

Nosso principal mercado de negócios é Europa, EUA, Ásia, América do Sul etc.

- Sua empresa tem sua própria marca ou não?

Temos nossa própria marca Sawolol para nossa seção de áudio inteligente de design patenteado.

- Qual termo de pagamento para sua empresa?

Normalmente, é t/t com antecedência (depósito de 30% antes da confirmação do pedido e o saldo antes do envio) para ordem de massa ou LC à vista para uma grande quantidade de ordem; Para ordem de amostra com pequena quantia, não há problema em transferir o pagamento via PayPal, Western Union ou Alipay também.

- Que justa sua empresa comparecerá a cada ano?

Normalmente, participaremos da HKTDC Hong Kong Electronics Fair na primavera e no outono Edition e na Fair etc. info@jaskeyworld.com , obrigado!

Sobre produtos:

- Você pode fazer produtos OEM/ODM?

Temos uma forte experiência em produtos de áudio personalizados OEM/ODM com equipe de P&D, equipe de design de produtos que pode fornecer três novos produtos de design trimestralmente com design exclusivo e função de alta qualidade ao nosso parceiro de negócios.

- Qual certificado para o seu desinfetante automático?

Nossos produtos estão em conformidade com o padrão de teste de produtos eletrônicos de CE, Rosh, FCC, BQB etc.

- Qual é o tempo de entrega para a ordem normal?

Tempo da amostra: 3-7 trabalhando para amostras normais.

Tempo de ordem de massa: 25-35 dias após a aprovação da amostra para pedidos diários.

- Qual pacote para o desinfetante automático?

Normalmente, é a nossa caixa de presente padrão e não há problema em fazer a caixa de pacotes personalizada conforme os requisitos.

- Quanto tempo para a garantia do produto?

A garantia de produtos é de um ano a partir da data de envio para as mercadorias sob uso normal, excluindo baterias e outros acessórios descartáveis.

Entre em contato conosco livremente para qualquer consulta por meio de nosso serviço de atendimento ao cliente info@jaskeyworld.com, obrigado! Vamos apoiá-lo completo por nossa cooperação comercial de longa data, obrigado!

Este é o nosso produto de venda quente:

[Ruído ativo Cancelamento de fone de ouvido sem fio AEP-0219](#)

[Ruído ativo Cancelamento de TWS Ear Earphones](#)

[Apearrear Bone Conduction fone de ouvido HEP-0170](#)