

Máy trợ thính không dây hai tai

Vật liệu: abs nhựa + silicone

Phiên bản Bluetooth: 5.0

Khoảng cách Bluetooth: 10 kim loại

Dung lượng pin tai nghe: 35mA

Hộp lưu trữ dung lượng pin: 300mA

Thời gian chơi: 4-5 giờ

Phí hộp ghi phí: 1-2 giờ

Thời gian chờ □ 120 giờ

NC Cấp độ □ □ 25dB


Tần suất: 2,4GHz

Kích thước hộp: 73*45*25 mm



TWS Binaural Wireless Hearing Aid



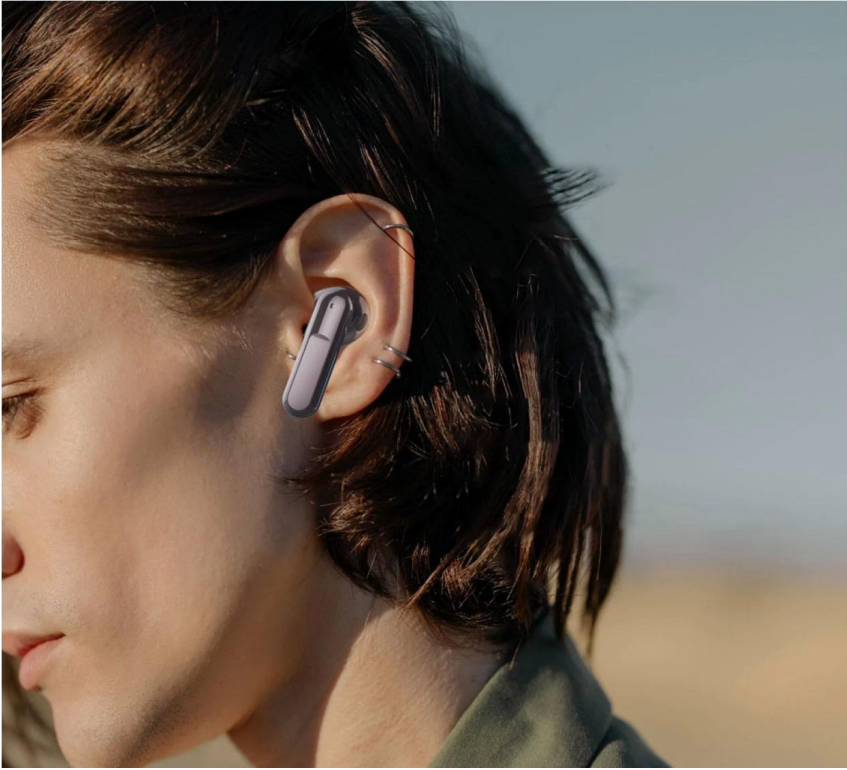

■ White



■ Black



■ Blue



■ Purple

Wireless Bluetooth transmission

Wireless Bluetooth 5.1, 10 meters distance transmission



Smart noise reduction

A woman with dark hair wearing a white earbud. A diagram is overlaid on her chest showing two waveforms. The left waveform is labeled "Noise reduction before" and the right waveform is labeled "After the noise reduction". The right waveform is significantly lower in amplitude than the left one.

Noise reduction before After the noise reduction

Use in multiple scenarios

Six circular images arranged in a 2x3 grid, each showing a different usage scenario for the earbuds.

- One-on-one communication: Two women in business attire talking.
- Watching TV: A man and a woman sitting on a couch watching a screen.
- Play the music: A woman playing a guitar outdoors.
- conversation: Three people in a meeting looking at a laptop.
- From the conversation: An older man smiling while talking to a woman.
- Children communication: A woman talking to a young girl.

One-on-one communication Watching TV Play the music

conversation From the conversation Children communication



HOW TO USE

Open the charging compartment, wait for the green/orange light to go out, and the headset prompts that the pairing is successful.

Open the charging compartment, wait for the green/orange light to go out, and the headset prompts that the pairing is successful. The earphones can be used individually or in pairs. In the state of playing music, touch the middle of the earphone handle with your hand, and the music sound of the music will change from small to large, and the volume can be controlled in a total of 16 levels

Pinch 1.5S to play music, then pinch 1.5S to pause the music

To answer the incoming call, tap 1S, and tap 1S to turn off the phone.

Hearing aid/assisted hearing mode, the 3S earphone has a prompt volume sound, indicating that the hearing aid auxiliary mode is turned on, and at the same time, the music can be played or paused without affecting the hearing aid function

In the hearing aid mode, the music volume can be adjusted.

You can use APP to pair earphones to adjust the effect of hearing aid magnification and adapt to different groups of people.

TWS Binaural Wireless Hearing Aid




IMPORTANT FUNCTIONS


Wearing this hearing aid can significantly improve hearing

OPERATION INTRODUCTION

CHARGE WAREHOUSE

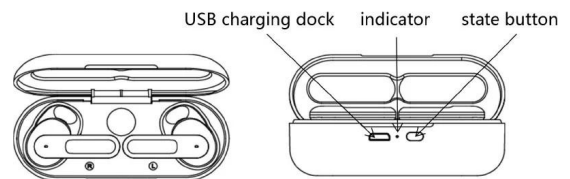

TWS EARPHONE

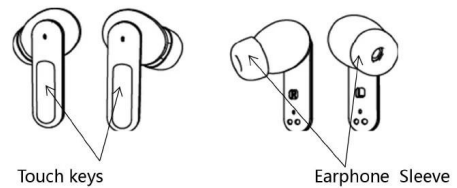

CHARGING COMPARTMENT FUNCTION

NO	Function	operational approach	LED indication
1	Charging the charging compartment	Connect lightning cable	When charging, the orange light flashes for a long time, and the orange light turns to green light for 3s after fully charged. Less than full power: the orange light keeps on for 8S.
2	Stop charging	Press the trigger button to unplug the lightning cable	Green light is on last 3S
3	Earphone in warehouse	Put the earphones in the compartment (after the earphones are in contact with the charging contacts)	Electricity > 10%, green light flash 1 time ; Electricity <=10%, orange light flash 1 time ;
4	Headphone out of warehouse	Headphone release bin (after the headphones leaves the charging contacts)	Electricity > 10%, green lightflash 1 time ; Electricity <=10%, orange light flash 1 time ;
5	low battery	When the power level of the trigger button is 0, remind	Orange light last flash, 3s
6	Charging compartment battery check	Short press button	Electricity > 25%, green light flash 1 time ; Electricity <=25%, orange light flash 1 time ;
7	Uncap	Open the charging compartment cover	Electricity > 10%, the green light turns on for 3 seconds and then goes out. Electricity <=10%, range light Flash 3 times;
8	Close the lid	Close the charging compartment cover	Electricity > 10%, the green light turns on for 3 seconds and then goes out; Electricity <=10%, the orange light turns on for 3s and goes out.
9	In-house matching	Open the cover, the green light(orange light is on and the headset is paired in the compartment)	Pairing successfully: the headset will prompt the pairing success message ONE TWO; Pairing failed: no prompt;
10	Full battery prompt	After fully charged	When it reaches full power: the green light is always on; When the lightning line is connected. When the battery is not full, press the button shortly, the orange light flashes for a long time; Fully charged, short press the button, the green light flash 1 time.

PROMPT TONE

Key pattern	Function	functional operation	LED indicate	voice prompt
MFB	Power on	open a position	The green light goes out	POWER ON
	Power off	Warehousing	Green light out	POWER OFF
	Match	Warehouse Entry/Exit	Green light out	ONE TWO
	Hearing Aid Mode	Default	NA	
	Pure Bluetooth mode	Touch & Hold 3s	NA	The beep goes on twice
	Answering calls	Short Press	NA	One beep
	hang up	Long press 1s/ double click	NA	One beep
	Decline calls	Long press 1 NA	NA	One beep
	play music	Long press 1.5s	NA	One beep
	Pause	Long press 1.5s	NA	One beep
V+/-	volume plus	Double click for 0.5s / hearing aid volume plus one level, a total of 6 levels, the volume is cycled from high to low	NA	Beep

HEARING AID SPECIFICATIONS

Hearing aid specifications	sensitivity of a pickup	-38dB
	Pickup distance	3-5m
	Pickup noise suppression	-60db
	Howling suppression ratio	-40db
	Pickup gain	-30db
	Pickup frequency	125HZ-10KHZ

BLUETOOTH SPECIFICATIONS

Bluetooth specifications	DSP	QC9864BT
	Bluetooth version	5.1
	Fraquency range	2.402GHz-2.480GHz
	ransmission distance (unobstructed)	≤15meter
	Track system	Stereo
	Output specifications	Speaker Impedance
Audio Power Output(Max)		135mW
Headphones Sensitivity		120dB
Fraquency range		20HZ-20KHZ
distortion factor		<1%
SNR		≥90dB
Depth of call noise reduction		adjustable0-30dB

Câu hỏi thường gặp:

Về công ty:

- Công ty của bạn đối phó với doanh nghiệp điện tử bao lâu? Bạn đang sản xuất?
Jaskey Limited là một thiết kế □ phát triển, công ty sản xuất trên 12 năm kinh nghiệm và chúng tôi chuyên về các sản phẩm điện tử thời trang hợp thời trang với giá trị gia tăng cho thị trường điện tử tiêu dùng.

- Bạn đã làm kiểm toán nhà máy nào?

Sản xuất của chúng tôi đã thực hiện kiểm toán nhà máy của Sedex 4P, BSCI, ISO9001 với hệ thống kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp.

- Thị trường kinh doanh chính của bạn là thị trường nào?

Thị trường kinh doanh chính của chúng tôi là Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Á, Nam Mỹ, v.v.

- Công ty của bạn có thương hiệu của riêng bạn hay không?

Chúng tôi có thương hiệu riêng của chúng tôi Sawolol cho phần âm thanh thông minh thiết kế được cấp bằng sáng chế của chúng tôi.

- Thời hạn thanh toán nào cho công ty của bạn?

Thông thường, đó là T/T trước (tiền gửi 30% trước khi xác nhận đơn đặt hàng và số dư trước khi giao hàng) cho đơn đặt hàng lớn hoặc LC khi nhìn thấy đơn đặt hàng số lượng lớn; Đối với đơn đặt hàng mẫu với số tiền nhỏ, cũng có thể chuyển khoản thanh toán qua PayPal, Western Union hoặc Alipay.

- Công ty nào công ty của bạn sẽ tham dự mỗi năm?

Thông thường chúng tôi sẽ tham dự Hội chợ Điện tử HKTDC Hong Kong trong cả phiên bản mùa xuân và mùa thu và công bằng CES, v.v. info@jaskeyworld.com , cảm ơn!

Về sản phẩm:

- Bạn có thể làm sản phẩm OEM/ODM không?

Chúng tôi có một kinh nghiệm mạnh mẽ trong các sản phẩm âm thanh tùy chỉnh OEM/ODM với nhóm R & D, nhóm thiết kế sản phẩm có thể cung cấp 3 sản phẩm thiết kế mới hàng quý với thiết kế độc đáo và chức năng chất lượng cao cho đối tác kinh doanh của chúng tôi.

- Chứng chỉ nào cho chất khử trùng tự động của bạn?

Các sản phẩm của chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn thử nghiệm các sản phẩm điện tử của CE, ROHS, FCC, BQB, v.v.

- Thời gian dẫn cho trật tự bình thường là gì?

Thời gian mẫu: 3-7 Làm việc cho các mẫu bình thường.

Thời gian đặt hàng lớn: 25-35 ngày sau khi phê duyệt mẫu cho các đơn đặt hàng hàng ngày.

- Gói nào cho chất khử trùng tự động?

Thông thường, đó là hộp quà tặng tiêu chuẩn của chúng tôi và bạn có thể thực hiện hộp gói tùy chỉnh theo yêu cầu.

- Thời gian bảo hành sản phẩm bao lâu?

Bảo hành sản phẩm là một năm kể từ ngày vận chuyển cho hàng hóa theo cách sử dụng bình thường không bao gồm pin và các phụ kiện chi tiêu khác.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách tự do cho bất kỳ truy vấn nào thông qua dịch vụ khách hàng của chúng tôi Mail info@jaskeyworld.com, cảm ơn! Chúng tôi sẽ hỗ trợ đầy đủ cho bạn vì sự hợp tác kinh doanh sắp tới của chúng tôi, cảm ơn!

Đây là sản phẩm bán hàng nóng của chúng tôi ☐

[Tai nghe không dây khử tiếng ồn hoạt động AEP-0219](#)

[Tiếng ồn tích cực khử TWS tai nghe TWS Bluetooth v5.1 Sport không dây và trò chơi Earbud AEP-0244](#)

[Tai nghe truyền dẫn xương mở Hep-0170](#)